


ETHICON

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Hemostáticos

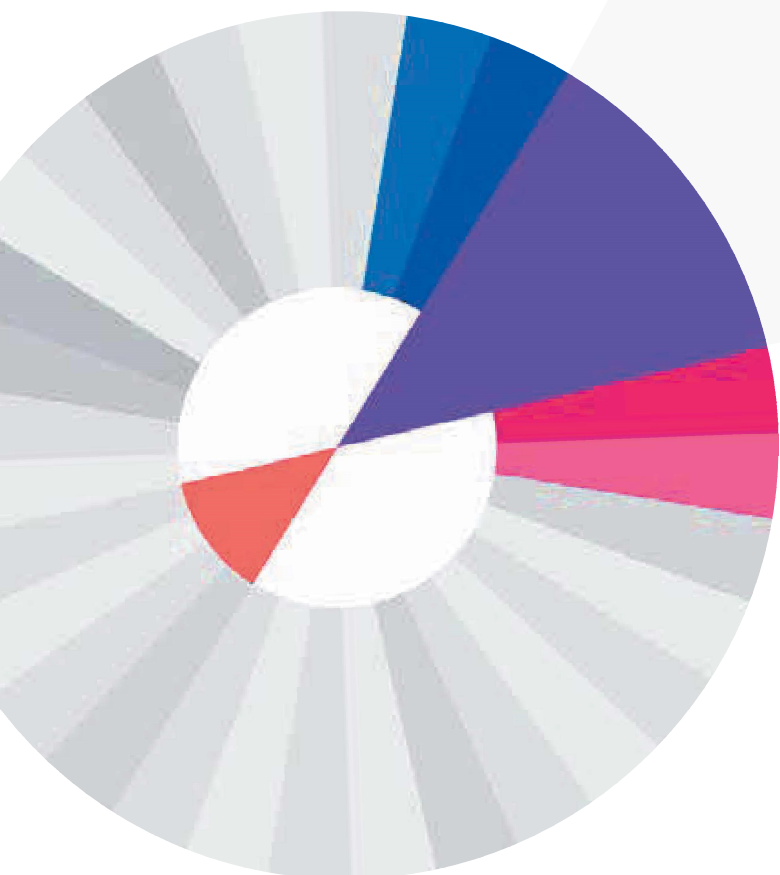

SURGICEL® SURGICEL NU-KNIT® SURGICEL FIBRILLAR®

Hemostáticos



SURGICEL®

Descripción

Bactericida.

Celulosa oxidada
regenerada y origen vegetal.

Hemostasia completa
entre 2 y 8 min.

Absorción controlada
7-14 días.

Diversidad de tamaños,
adaptándose a las
distintas necesidades.

Flexible,
ligeramente entrecruzado.

Fácil de manipular,
no se adhiere a guantes
o instrumental quirúrgico.

No se deshilacha al cortarlo.



SURGICEL NU-KNIT®

Descripción

Bactericida.

Celulosa oxidada
regenerada y origen vegetal.

Hemostasia Rápida y Eficaz
1-5 min.

Absorción controlada
7-14 días.

Se puede suturar
gracias a su grosor.



SURGICEL FIBRILLAR®

Descripción

Bactericida.

Celulosa oxidada
regenerada y origen vegetal.

Hemostasia Rápida y Eficaz
1-3 min.

Absorción controlada
7-14 días.

Versátil.

Aplicable en fibras,
rollo o parches.

Se adapta
a superficies irregulares.

Cauterío bipolar
se puede aplicar entre capas.

SURGICEL®

SURGICEL NU-KNIT®

SURGICEL FIBRILLAR®

HEMOSTÁTICOS

SURGICEL®

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / MATERIAL	LONGITUD	UNIDADES POR CAJA
1951	SURGICEL	5cm x 35cm	12
1952	SURGICEL	10cm x 20cm	12
1953	SURGICEL	5cm x 7.5cm	12

SURGICEL NU-KNIT®

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / MATERIAL	LONGITUD	UNIDADES POR CAJA
0001941	SURGICEL NU-KNIT	2.5cm x 7.5cm	10
0001943	SURGICEL NU-KNIT	7.5cm x 10cm	12
0001946	SURGICEL NU-KNIT	15cm x 23cm	10

SURGICEL FIBRILLAR®

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / MATERIAL	LONGITUD	UNIDADES POR CAJA
411961	SURGICEL FIBRILLAR	2.5cm x 5cm	10
411962	SURGICEL FIBRILLAR	5cm x 10.2cm	10
411963	SURGICEL FIBRILLAR	10.2cm x 10.2cm	10

SPONGOSTAN®

HEMOSTÁTICOS

Descripción

Spongostan® es una esponja de gelatina. Es un hemostático tópico absorbible. Actúa como efecto físico. Provee absorción, barrera al flujo sanguíneo y una matriz para la formación del coágulo.

Indicaciones

Spongostan® está indicado para asistir en procedimientos quirúrgicos en el control de sangrado de venas capilares y sangrado en capas cuando el uso de ligaduras u otros métodos convencionales es difícil o inefectivo. La versatilidad de la presentación en polvo es ideal para "rincones y grietas" difíciles de alcanzar. Se mezcla fácilmente para formar una pasta que se puede esparcir.

Presentación

Standard, Especial, Film, Anal, Dental y en Polvo.

Perfil De Absorción

Se absorbe en 4 a 6 semanas, y 2-5 días en contacto con la mucosa.

Almacenamiento

Ambiente seco con temperatura menor a 25°C.



Gelatina absorbible

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / MATERIAL	LONGITUD	UNIDADES POR CAJA
MS0001	SPONGOSTAN Filme	20cm x 7cm x 0.5mm	20
MS0002	SPONGOSTAN Estandar	7cm x 5cm x 1mm	20
MS0003	SPONGOSTAN Especial	7cm x 5cm x 1mm	20
MS0004	SPONGOSTAN Anal	3cm x 8cm	20
MS0005	SPONGOSTAN Dental	1cm x 1cm x 1cm	24
MS0008	SPONGOSTAN en Polvo	1gr por frasco	6

OMNEX®

HEMOSTÁTICOS

Descripción

El sellador sintético OMNEX® es fácil de preparar y de utilizar.

Proporciona un sellado rápido y seguro para obtener los mejores resultados tras ser utilizado para refuerzo de todo tipo de Anastomosis Vasculares.

Solución sintética pura, sin riesgos de reacciones inmunógenas ni enfermedades.

Mezcla única de 2-octil cianocrilato (2-OCA) y butilo lactolil cianocrilato (BLCA)

Control y precisión

Fórmula concentrada ligera y transparente.

Cánula flexible que permite una colocación precisa y acceso a lugares de difícil alcance.

Se necesita una cantidad muy pequeña para lograr un sellado fuerte y flexible.



OMNEX®

CÓDIGO	EMPAQUE
SS1EU4	Sellador quirúrgico OMNEX® cajas de 4 unidades